


斑马导丝

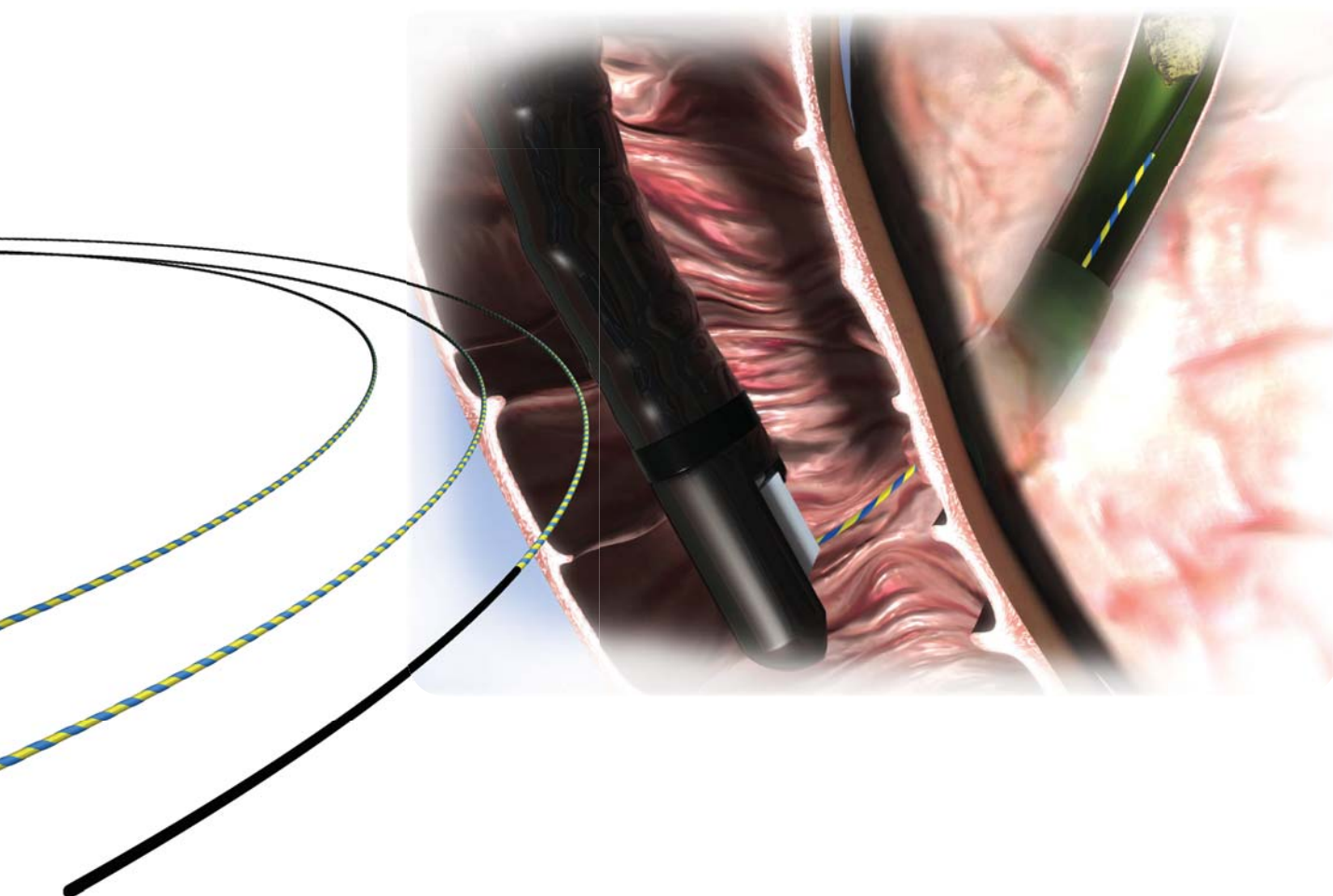

常用规格:

订货号	最大直径 (inch)	长度 (mm)	使用次数	描述	品牌
MTN-BM-89/26-A	0.035	2600	一次性使用	65mm直型柔软亲水头端	MICRO-TECH 微创
MTN-BM-89/45-A	0.035	4500	一次性使用	65mm直型柔软亲水头端	MICRO-TECH 微创
GGW-03-35-450	0.035	4500	重复性使用	柔软头端, 50mm长锥形铂制头端	Medi-Globe
GGW-04-35-450	0.035	4500	重复性使用	标准头端, 50mm长锥形铂制头端	Medi-Globe

产品特点:

- 充分的安全性考虑
前端无内芯设计的软头, 遇阻后会导丝推进方向, 减少导丝对患者的侵袭。
- 卓越的插入性能
超长的65mm亲水头端, 减轻摩擦力, 显著提高导丝插入性能。稳固的导丝内芯, 有效传递插入时的扭转力, 实现导丝头端与手持部位的同步旋转, 更容易通过复杂的狭窄部位和选择性插管
- Medi-Globe可重复用斑马导丝
亲水特氟隆涂层, 50mm长锥形铂制尖端, 耐高温消毒, 无菌包装。