


## 鹅首式输卵管通液器

输卵管通液器，以偏心性气囊注气多少来调整通液器头端的角度，同时球囊又封住宫腔内口，使三腔一体输卵管再通器不易滑脱，造影剂不从宫腔外漏。带活瓣的通液器使得造影剂不从通道外漏，用通过稀释后的低密度造影剂从通道进入宫腔，可以清楚的显示各种形态的子宫角，（如上翘、下垂、水平等），顺利进行疏通，一步到位。

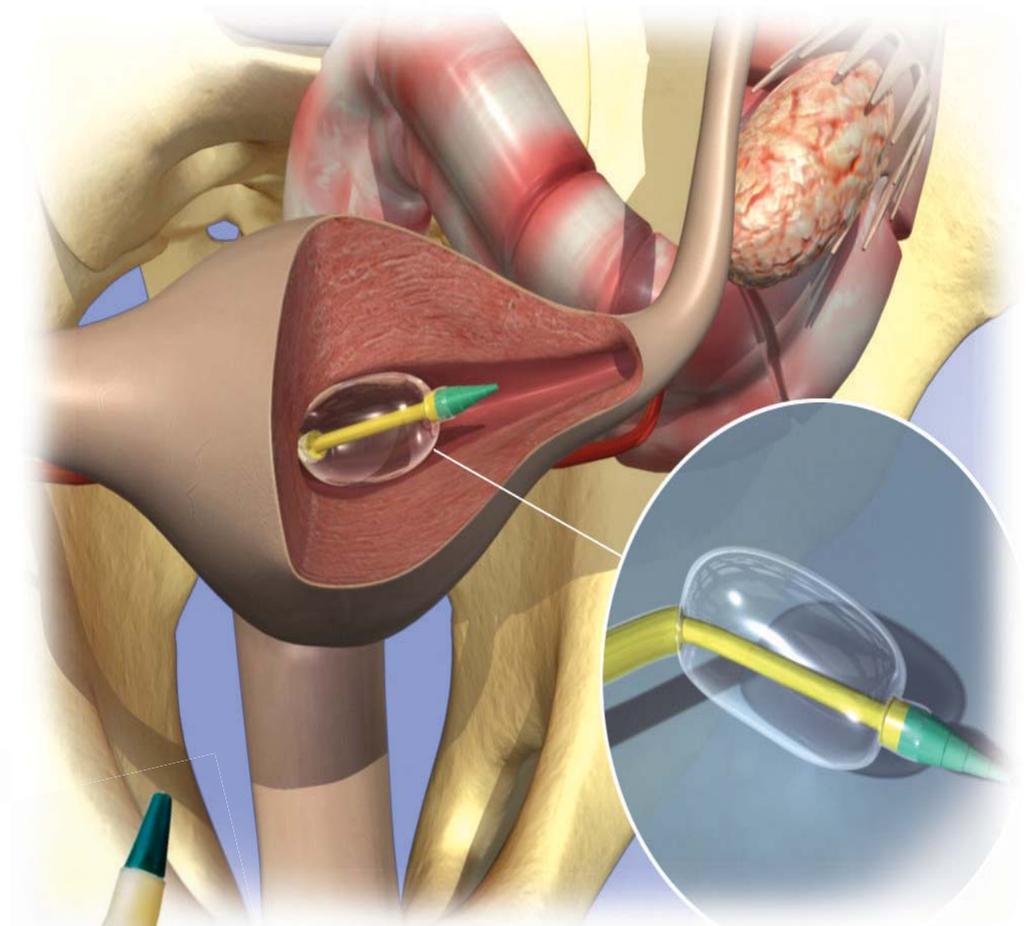

### 产品特点：

- 无需盲目地、反复地用导丝找子宫角，而且大大的减少造影剂的用量及手术时间。
- 无需盲目地、反复地用导丝找子宫角，对子宫内膜损伤小。
- 经济适用，集常规造影、选择性造影和再通于一身，适合在各种类型医院推广应用。

### 常用规格：

产品型号	主导管直径 (mm)	有效长度 (mm)
TY5350	5	350